



Gebruik & onderhoud

Natuurlijk wilt u langdurig en zonder klachten genieten van uw schoenen. Goed onderhoud is dus van belang. Het bevordert de gebruiksduur en het draagcomfort. Hoe onderhoudt u uw schoenen het best? Wij hebben alle belangrijke punten over het gebruik en het onderhoud op een rijtje gezet.

Aan- en uittrekadviezen

Maak de sluiting altijd volledig los. Dat is voor u makkelijker en voor de levensduur van de schoenen beter. Verder adviseren wij het gebruik van een schoenlepel. Zo voorkomt u dat de schoenen onnodig vervormen. Bij het aantrekken moet u uw voeten goed tegen de achterkant van de schoen plaatsen. Maak vervolgens de sluiting weer stevig vast voor een goede fitting. U voorkomt zo het schuiven van de voeten in de schoenen.

Gebruik

Uw schoenen zijn grotendeels gemaakt van leer. Leer is een natuurproduct en heeft een unieke eigenschap. Geleidelijk gaat de leren schoen naar de vorm van uw voet staan. Uiteindelijk voelt leer aan als uw tweede huid. Prettig en comfortabel. Maar eerst ook nog vreemd en onwennig. Uw voeten moeten namelijk wennen aan de correctie en de ondersteuning die uw schoenen geven. We raden dan ook aan de schoenen in te lopen. Het inlopen bouwt u binnen twee weken op. Het inloopadvies vindt u hiernaast.


Transpiratie

Het dragen van gesloten schoenen kan het transpireren verergeren. Met de volgende maatregelen vermindert u deze klacht:

- Wissel regelmatig van schoenen;
 - Draag katoenen of wollen sokken en verschoon deze dagelijks;
 - Was uw voeten regelmatig zonder zeep;
 - Gebruik een anti-transpiratiecrème of een voetpoeder.
- Hebt u nog steeds transpiratieklachten? Raadpleeg dan uw huisarts of dermatoloog.

Inloopadvies

Een inlooptijd is dus noodzakelijk. Overleg met ons welk inloopschema het meest geschikt is voor uw voeten. Het schema is afhankelijk van onder andere uw medische indicatie en ervaring. Ons advies zorgt voor een comfortabel draagcomfort.

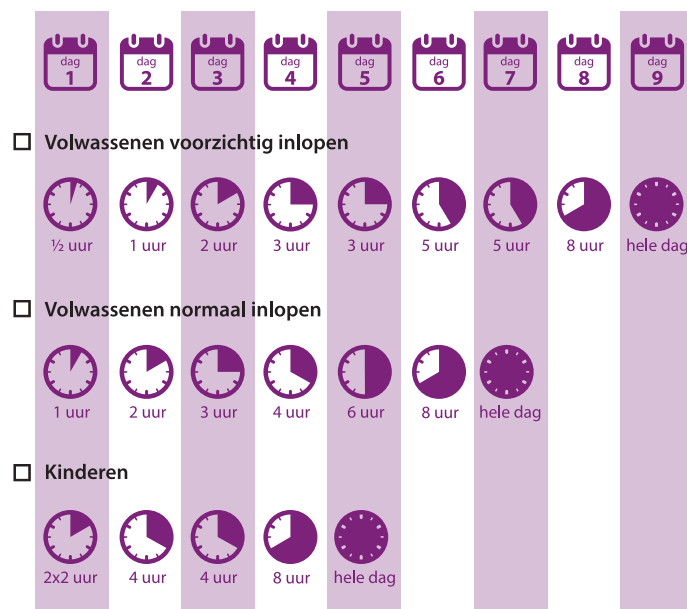

Hebt u problemen tijdens de opbouwfase? Ga dan een stap terug in het schema. Vervolgens houdt u twee dagen dezelfde draagtijd aan. Zo kunnen we uw klachten beter beoordelen. Na ongeveer twee weken moet u gewend zijn aan de correctie. Hebt u na deze periode nog last? Neem dan contact met ons op voor een controleafspraak.

Wisselen

Uw schoenen nemen transpiratievocht op. U moet ze dan ook regelmatig luchten. Na aanschaf van het eerste paar kunt u aanspraak maken op een wisselpaar. Draag vervolgens de schoenen niet langer dan twee dagen achtereen. Wisselen is noodzakelijk. Het wisselen verlengt namelijk de levensduur van uw schoenen.

Zijn uw schoenen erg nat? Zet ze nooit bij een warmtebron om ze sneller te laten drogen. Plaats er houten schoenspanners in en laat ze daarna drogen op kamertemperatuur.

Onderhoud

Zorgvuldig onderhoud bevordert de gebruiksduur van uw kostbare schoenen. Poets uw leren schoenen daarom minimaal één keer per week met een schoencrème. Dan blijven ze mooi en soepel. Suède- en nubuckschoenen kunt u borstelen met een suèdeborstel of een nubuckblokje. Verder dient u de schoenen regelmatig in te spuiten met een beschermerspray.

Draagt u uw schoenen even niet? Zet er dan schoenspanners in. Zo blijven uw schoenen in optimale vorm. Gaan uw schoenen tijdens het lopen een beetje kraken? Strooi dan wat talkpoeder tussen het losse voetbed en de binnenzool.

Reparatie

Het doorlopen op versleten hakken en zolen kan onherstelbare schade aanrichten. Op tijd vervangen is dus meer dan verstandig. Natuurlijk voeren wij deze reparaties graag voor u uit. Het is in uw belang. Zo behoudt u de garantie op uw schoenen.

Voetverzorging

Goede voetverzorging is voor iedereen van belang. U verkleint de kans op eelt, likdoorns, ingegroeide nagels en andere vervelende klachten. Enkele aandachtspunten:

- Was de voeten dagelijks en droog ze goed af. Beperk het gebruik van zeep.
- Knip nagels recht en niet te kort af.
- Verwijder overmatig eelt.
- Smeer de voeten dagelijks in met een goede voetencrème.

Diabetici en reumapatiënten kunnen beter een medisch pedicure inschakelen. Deze specialist weet precies welke behandeling het meest effectief is.

Bij diabetici vermindert de bloedtoevoer in benen en voeten. De huid wordt kwetsbaar en wondjes genezen zéér moeizaam. Vervolgens kunnen nagels verdikken en vervormen. Ook kan het gevoel in de voeten verminderen of totaal verdwijnen. Met diabetes hebt u dus een verhoogde kans op ernstige voetproblemen. Wat kunt u zelf doen om problemen te voorkomen?

- Loop nooit op blote voeten, draag altijd uw aangepaste schoenen.
- Controleer vóór het aantrekken van de schoen op de aanwezigheid van vuil, steentjes of iets dergelijks.
- Zorg dat uw schoenen niet knellen. Indien dit het geval is, maak dan direct een controleafspraak met ons.
- Controleer uw voeten inclusief de onderkant regelmatig op wondjes en drukplekjes. Eventueel met een spiegel of met behulp van iemand.
- Neem geen voetbaden.
- Experimenteer niet met wondjes, maar laat er direct naar kijken.
- Laat regelmatig uw voeten en schoenen controleren.

Geheugensteun

Wilt u onthouden wanneer u weer in aanmerking kunt komen voor vergoeding van een nieuw paar schoenen? Noteer dan de data in het schema hieronder.

Datum aanschaf _____

Datum controle _____

Voor de verstrekkingregels van uw zorgverzekeraar verwijzen wij u graag naar de betreffende productfolder of onze website.

Breed assortiment

De leden van Voetcentraal verstrekken diverse hulpmiddelen. Vraag gerust naar de folders over deze producten en diensten.

www.voetcentraal.nl



Radewijnsstraat 8
8022 BG Zwolle
T 038 - 453 13 37
info@kemerink.nl
www.kemerink.nl



Zeestraat 93a
2211 XD Noordwijkerhout
T 0252 - 34 04 61
info@kaptein-orthopedie.nl
www.kaptein-orthopedie.nl



Cornelis van Uitgeeststraat 17
1508 EG Zaandam
T 075 - 628 12 57
info@verweij-voetcentraal.nl
www.verweij-voetcentraal.nl



Jan Vermeerlaan 253a
4703 KW Roosendaal
T 0165 - 53 61 24
info@avanderlinden.nl
www.avanderlinden.nl



Frijdastraat 45
2288 EZ Rijswijk
T 070 - 319 19 12
info@robertschilte.nl
www.robertschilte.nl

